


JT-S 桌上型彈簧除振台



使用前請遵循本說明之安裝步驟
作業時，請注意安全


1 檢查零件

檢查零件及數量是否正確。

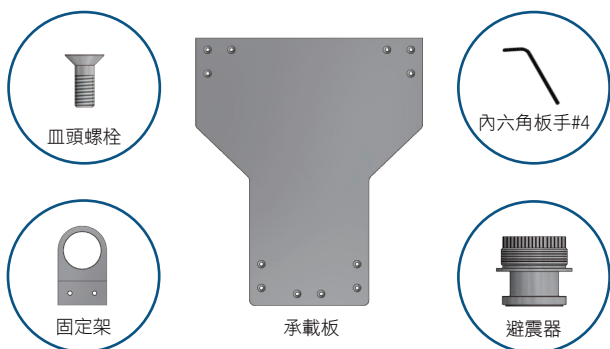


2 組裝

- 1 使用內六角板手#4及皿頭螺栓將承載板與固定架鎖固。

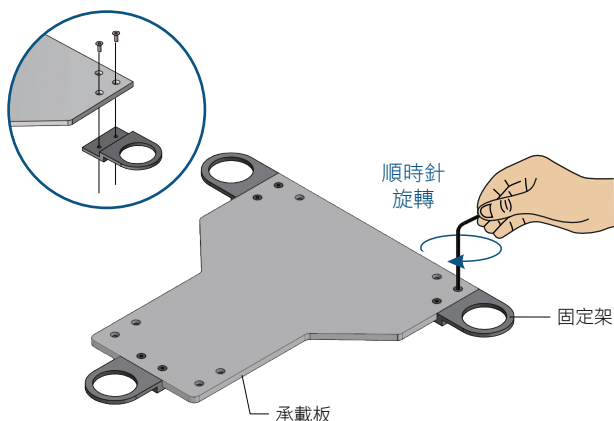


- 2 將避震器依逆時針方向旋轉與固定架組合，高度調整至螺牙的中間位置。

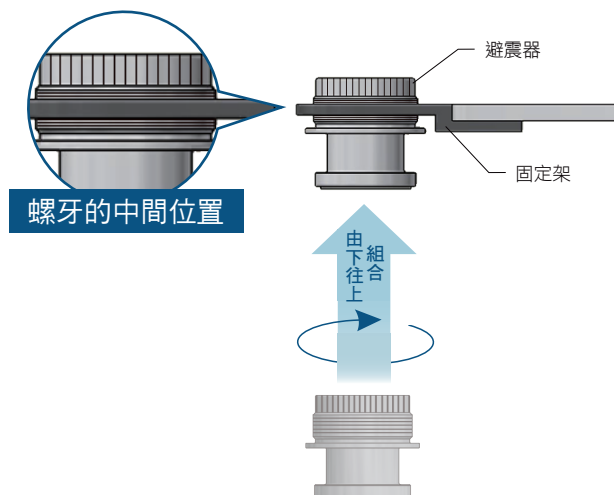


3 水平調整

- 1 將儀器設備放置於承載板上，並使用水平尺檢示除振台的水平。

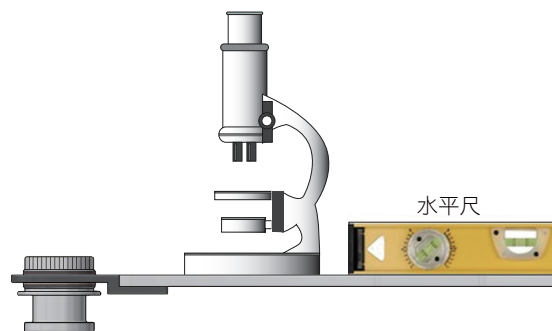

- 2 順時針旋轉為昇高，逆時針旋轉為降低操作高度。

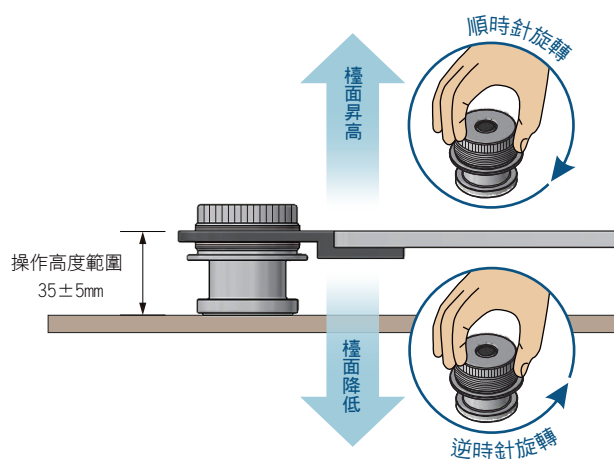

注意事項

- 使用時不能超過設計載重。
- 如安裝空間不足，可變換固定架的方向。

